

Памятка пользователя

Ультрафонофорез с набором гелей Ферменкол Элактин в домашних условиях при помощи ультразвукового аппарата ФизиоФон

Фонофорез с набором гелей Ферменкол Элактин — эффективный метод введения активных компонентов на всю глубину стрий (растяжек) и рубцов постакне по атрофическому типу.

Высокочастотная ультразвуковая волна 2,65 МГц эффективно воздействует на глубине до 1-3 см, стимулирует кровообращение и обменные процессы в проблемной зоне, способствует разрыхлению патологических поврежденных коллагеновых и эластиновых волокон, что способствует быстрому восстановлению каркаса дермы.

Благодаря фонофорезу с гелями Ферменкол S и Элактин ускоряются процессы ремодуляции структуры стрий (растяжек) и рубцов постакне, происходит обновление кожи. Успешный опыт применения фонофореза с набором Ферменкол Элактин позволяет говорить об высокой эффективности данного метода.

Курс фонофореза с набором Ферменкол Элактин: 20 процедур.


Интервал между курсами: 10-14 дней.

Продолжительность процедуры: 3-5 минут на одну область. Общая продолжительность процедуры в день на нескольких областях не должна превышать 20 минут в день.

Интервал между процедурами: не более 2-х дней.

Периодичность процедур:

для коррекции стрий (растяжек) и рубцов постакне 10 процедур с гелем Ферменкол S, затем 10 процедур с гелем Элактин. Для достижения наилучшего результата рекомендуется провести 3-4 курса.

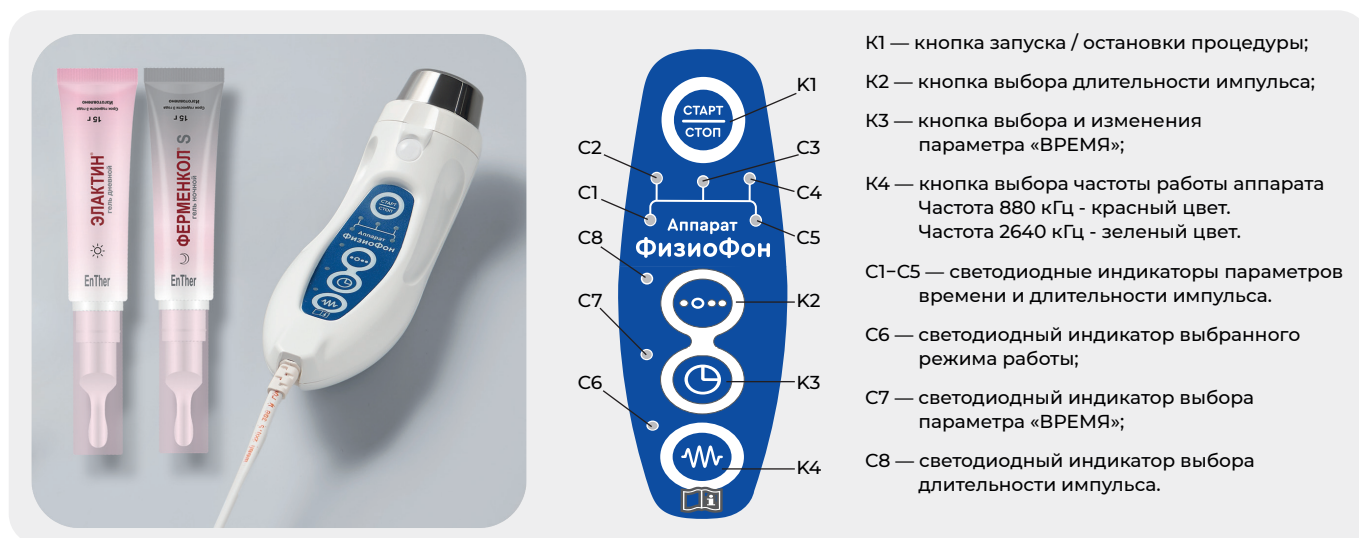

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

1. Предварительно очистить кожу, процедура может проводиться в положении сидя или лежа.
2. Подключить аппарат к сети, установить время процедуры и выбрать режим 2650 кГц. Нажать кнопку "Старт".
Интенсивность: 0,3 Вт в непрерывном режиме.
3. Нанести на обрабатываемый участок кожи гель в необходимом количестве из расчета 0,5-1 г на 1 см² и медленно, без усилий перемещать головку излучателя по проблемному участку поступательными и круговыми движениями, сохраняя постоянный контакт с кожей. Между УЗ-насадкой и кожей не должно быть воздуха! Не допускать высыхания геля и добавлять его по мере необходимости.
4. Звуковой сигнал оповестит об истечении установленного времени процедуры. Отключить аппарат, снять сухой салфеткой остатки геля с излучателя и протереть спиртовой салфеткой.

ФЕРМЕНКОЛ®
ПРОТИВОРУБЦОВЫЙ ЭФФЕКТ



РФ, 191025, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. МО Литейный округ,
ул. Маяковского, д. 36, лит. А

+7 (812) 327-54-47

+7 (931) 975-86-26