

Памятка пользователя

Ультрафонофорез с набором гелей Ферменкол Элактин в домашних условиях при помощи ультразвукового аппарата SuperSonic

Фонофорез с набором гелей Ферменкол Элактин — эффективный метод введения активных компонентов на всю глубину стрий (растяжек) и рубцов постакне по атрофическому типу.

Высокочастотная ультразвуковая волна 1 МГц в секунду эффективно воздействует на глубине до 10-12 миллиметров, стимулирует кровообращение и обменные процессы в проблемной зоне, способствует разрыхлению патологических поврежденных коллагеновых и эластиновых волокон, что способствует быстрому восстановлению каркаса дермы.

Благодаря фонофорезу с гелями Ферменкол S и Элактин ускоряются процессы ремодуляции структуры стрий (растяжек) и рубцов постакне, происходит обновление кожи. Успешный опыт применения фонофореза с набором Ферменкол Элактин позволяет говорить о высокой эффективности данного метода.

Курс фонофореза с набором Ферменкол Элактин составляет 20 процедур. Интервал между курсами: 10-14 дней, между процедурами: не более 2-х дней.


Продолжительность процедуры: 3-5 минут на одну область. Общая продолжительность процедуры на нескольких областях не должна превышать 20 минут в день.

Интенсивность излучения при применении в области туловища и конечностей — 0,3 Вт/см², в области лица и шеи — 0,2 Вт/см². Постоянный ультразвуковой режим.

Периодичность процедур:

- для коррекции «застарелых» растяжек и рубцов постакне (более 1 года): 10 процедур с гелем Ферменкол S, затем 10 процедур с гелем Элактин; 3-4 курса.

- для коррекции молодых растяжек и рубцов постакне (менее 1 года): чередовать процедуры с гелем Ферменкол S и гелем Элактин, всего по 10 процедур с каждым гелем; 1-2 курса.

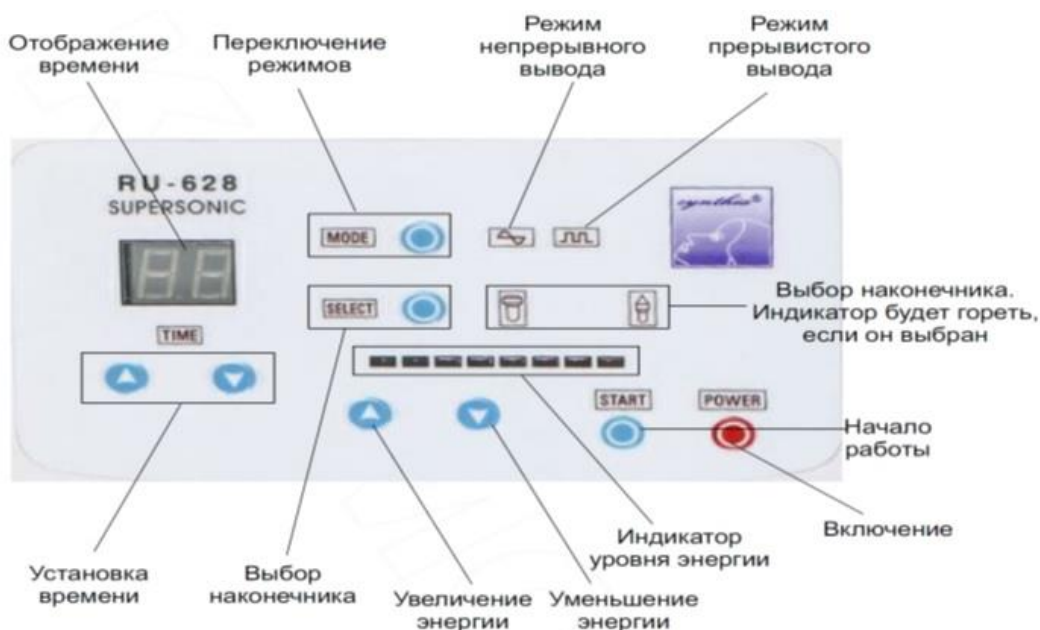

Пошаговая инструкция по применению:

1. Предварительно очистить кожу, процедура может проводиться в положении сидя или лежа.
2. Подключить аппарат к сети, присоединить ультразвуковые наконечники, нажать кнопку «Power», по умолчанию будет установлен режим «Постоянный непрерывный вывод».
3. Кнопкой «Select» выбрать необходимый наконечник, установить время процедуры и нажать кнопку «Start».
4. Кнопками «Увеличение энергии» и «Уменьшение энергии» установить интенсивность излучения 0,2 Вт/см² (третий по счету индикатор) для процедур на лице или 0,3-0,4 Вт/см² (четвертый и пятый индикатор) для процедур на туловище или конечностях. ВАЖНО не увеличивать интенсивность излучения при работе с гелем Ферменкол S более 0,4 Вт/см² во избежание инактивации фермента при нагревании излучателя.
5. Нанести на обрабатываемый участок кожи гель в необходимом количестве из расчета 0,5-1 г на 1 см² и медленно, без усилий перемещать головку излучателя по проблемному участку поступательными и круговыми движениями, сохраняя постоянный контакт с кожей. Между излучателем и кожей не должно быть воздуха! Не допускать высыхания геля и добавлять его по мере необходимости.
6. Звуковой сигнал оповестит об истечении установленного времени процедуры. Отключить аппарат, снять сухой салфеткой остатки геля с излучателя и протереть спиртовой салфеткой.